


Wat te doen bij de melding: Vervallen strip of LOT nummer niet correct?


In het geval u de melding 'Vervallen strip' of 'LOT nummer niet correct' krijgt dient eerst te controleren of de meetstrips nog houdbaar zijn. Dit kunt u zien op de verpakking van de meetstrips (achter de zandloper). Wanneer de houdbaarheidsdatum nog niet verstreken is dient u de stripcode en het LOT nummer te controleren en aan te passen.

### Werking knoppen en scherm.

Op het meetapparaat vindt u vier knoppen. De functies van de knoppen komen overeen met de opties in het scherm.

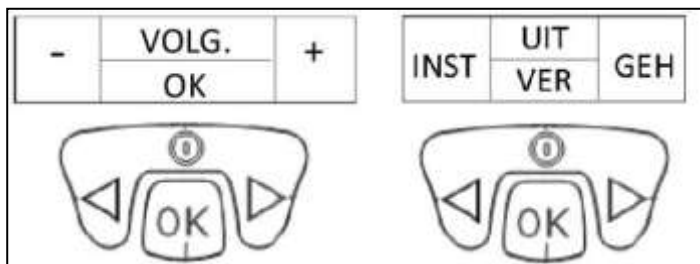

1) Druk 2 seconden op de aan-/uit knop (het ronde knopje) om het meetapparaat aan te zetten.

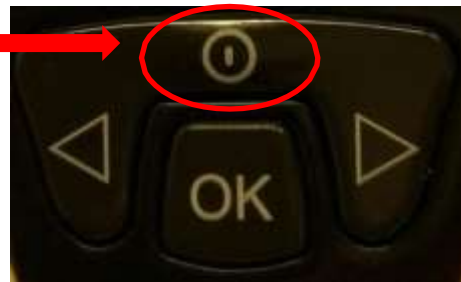

2) Voer een teststrook in.

**LET OP: de rode pijlen moeten zichtbaar zijn aan de onderzijde en moeten naar boven wijzen, zie afbeelding hiernaast.**



3) Controleer of de 7 cijferige stripcode en het LOT nummer overeenkomen met de codes op de verpakking van de teststrook.




4) Indien deze beide overeenkomen drukt u op OK, indien de codes niet overeenkomen drukt u op de linker knop ( het potloodje) om de codes aan te passen.




5) Allereerst dient u de stripcode aan te passen.


6) Gebruik - en + om het eerste gemarkeerde cijfer te wijzigen. Is het cijfer correct druk dan op VOLG om naar het volgende cijfer te gaan.

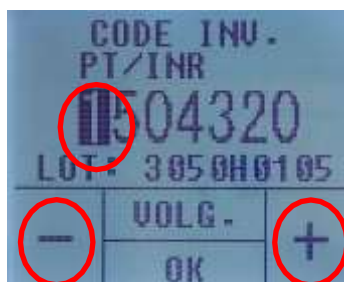

7) Is het cijfer correct druk dan op VOLG (het ronde knopje) om naar het volgende cijfer te gaan.

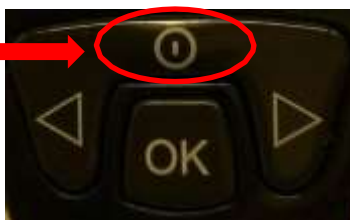

8) Vervolgens bevestigt u het volgende cijfer met VOLG of gebruik - en + om het gemarkeerde cijfer te wijzigen. Indien het cijfer correct gewijzigd is drukt u op VOLG (het ronde knopje) om naar het volgende cijfer te gaan.

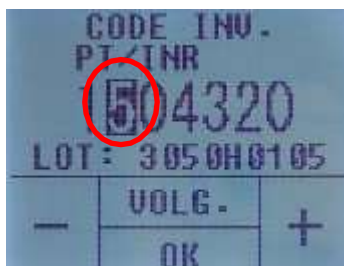


9) Zo gaat u verder totdat de gehele stripcode cijfer voor cijfer aangepast of bevestigd is.




10) Vervolgens dient u het LOT nummer te bevestigen of aan te passen.

Komt het LOT nummer is z'n geheel overeen, drukt u dan op OK

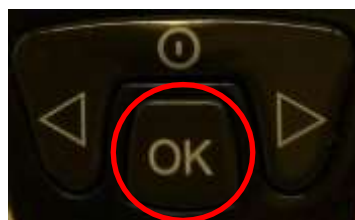

11) Is het LOT nummer niet juist, druk dan op VOLG (het ronde knopje) om naar het eerste cijfer van het LOT nummer te gaan.

Dit cijfer wordt dan gemarkeerd.

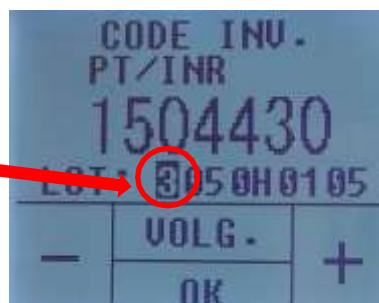


**LET OP: Het LOT nummer bestaat uit een serie van: cijfer – cijfer – cijfer – cijfer- letter – dubbel cijfer – cijfer – cijfer**

12) Vervolgens bevestigt u het volgende cijfer met VOLG (het ronde knopje) of gebruik - en + om het gemarkeerde cijfer te wijzigen. Indien het cijfert correct gewijzigd is drukt u op VOLG (het ronde knopje) om naar het volgende cijfer te gaan.



**13) LET OP!! De nul in het LOT nummer wordt weergegeven als:**

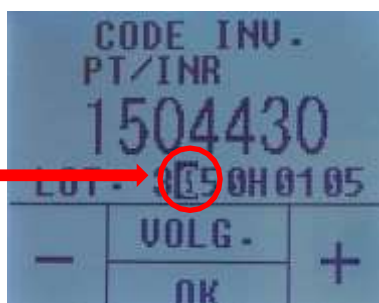


14) Vervolgens bevestigt u het volgende cijfer met VOLG (het ronde knopje) of gebruik - en + om het gemarkeerde cijfer te wijzigen. Indien het cijfer correct gewijzigd is drukt u op VOLG (het ronde knopje) om naar het volgende cijfer te gaan.



15) Zo gaat u verder totdat het gehele LOT nummer cijfer voor cijfer, vergeet de letter niet, aangepast of bevestigd is.



16) Wanneer u de juiste codes heeft ingevoerd, drukt u tweemaal op OK.

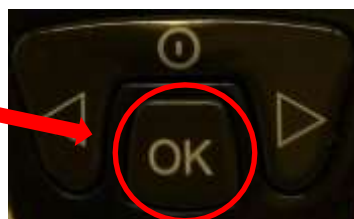


17) Het meetapparaat zal nu gaan OPWARMEN.



18) Wanneer het meetapparaat gereed is voor de meting geeft het meetapparaat een pieptoon en toont BLOED TOEV in het display.

Gelijktijdig begint het meetapparaat vanaf 120 Seconden terug te tellen. U moet de bloeddruppel binnen deze tijd hebben opgebracht. Nadat u geprikt heeft dient u de bloeddruppel binnen 15 seconden aan te brengen.

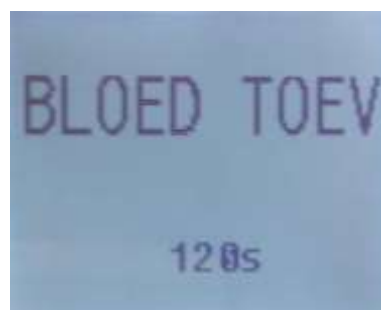

**LET OP: de bloeddruppel dient voldoende groot te zijn!  
Voeg nooit extra bloed tijdens de meting toe!**